

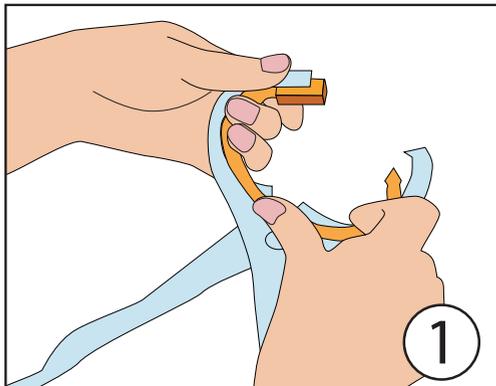


# 牛ワッカ丸取り付け用ハンドパンチ使用方法


## 【各部名称】

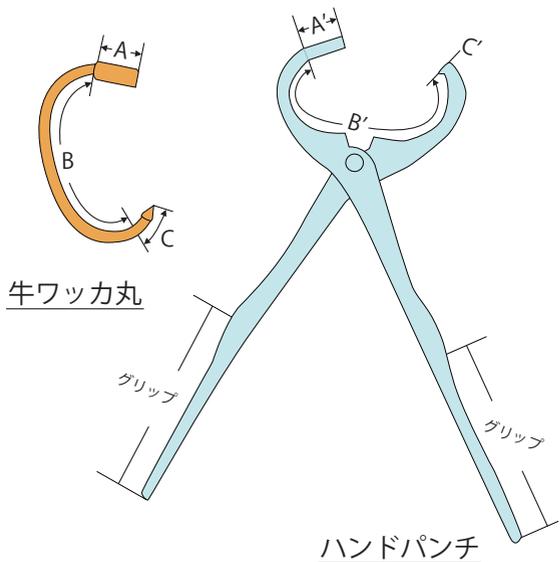


ハンドパンチをいっぱい開き、牛ワッカ丸のA部をハンドパンチのA'に嵌め込みます。続いてB部をB'の溝へAの側からCの側へ嵌め込んでいきます。

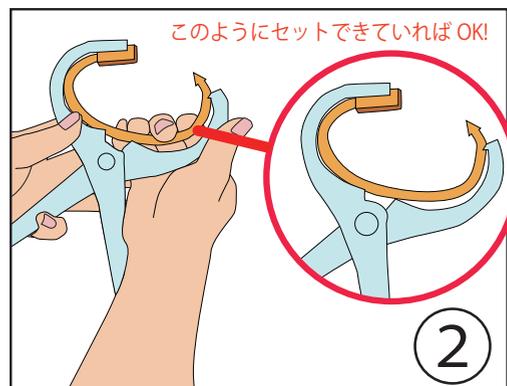


A,BがA',B'に嵌ったらB,C境界外側の凹部へC'の凸部を嵌め込みセットは完了です。牛ワッカ丸をハンドパンチにセットしたら長時間放置せずできるだけ早く装着してください。

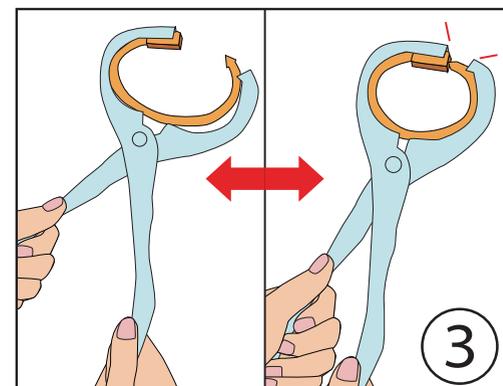


セットが完了したらハンドパンチを開閉しAの穴にCの先端が入ることを確認します。Cの先端はAの穴の中心より下側にずれています。

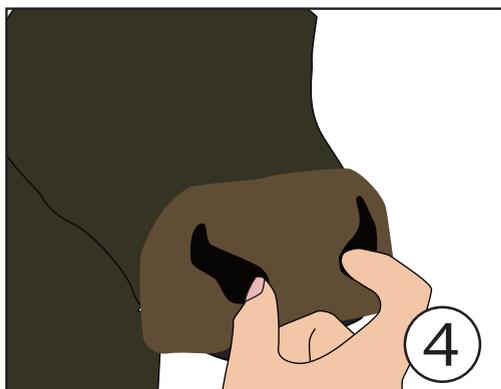


ロープ等で牛を確実に保定したら牛の鼻中隔を指で触り、軟骨のない部分を確認します。作業に慣れればハンドパンチにセットした牛ワッカ丸を鼻中隔に当てて軽く閉開することで打ち込む位置を特定します。

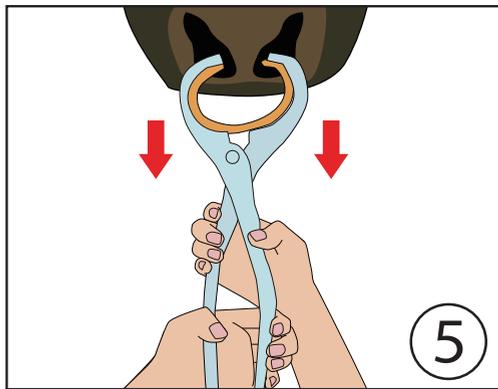

位置が決まったら牛ワッカ丸を当てがいハンドパンチのグリップを両手で握るように持ち換えます。ハンドパンチを手前に軽く引きながらカチッという感触を確認するまでしっかりと打ち込みます。

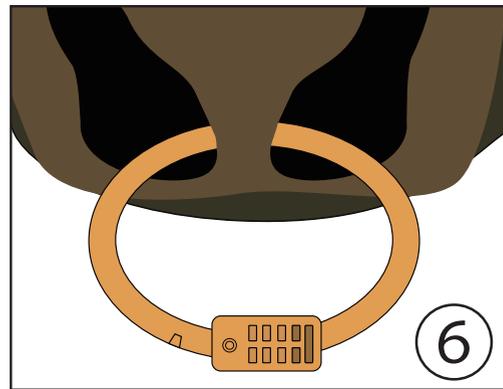

牛ワッカ丸を装着したらA,Cの結合部を顔の正面に来るように回して完了です。

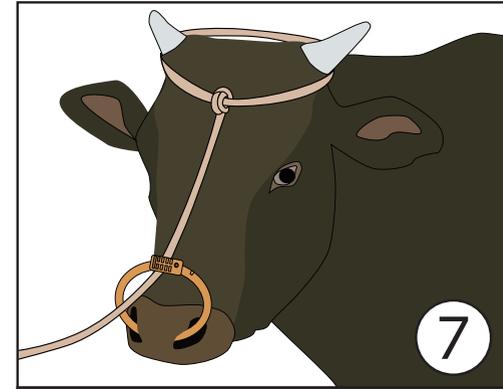

ロープを牛ワッカ丸につなぐ場合はイラストのようにロープの力が全て牛ワッカ丸に集中しないような掛け方をしてください。牛は十分制御できます。